


## Артериальные канюли Easy Flow

Артериальные канюли Easy Flow предназначены для безопасной и удобной прямой канюляции аорты.

Канюли снабжены интегрированным изгибаемым обтуратором, способным помочь в введении канюли через боковую торакотомию.

Конфигурация дисперсионного наконечника уменьшает риск смещения атеросклеротической бляшки потоком крови.

### Артериальная канюля Easy Flow

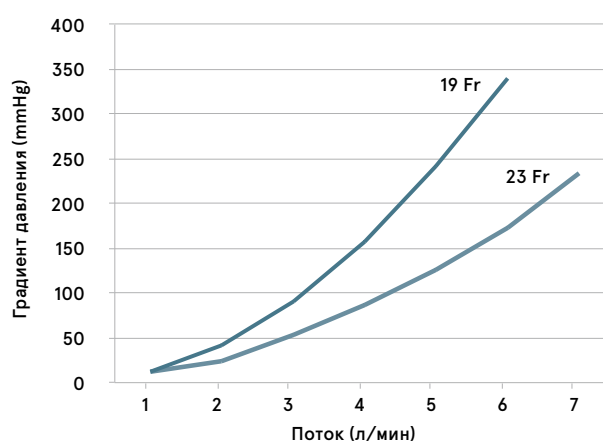


| Артикул | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (FR) | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ) | ДЛИНА (СМ) | НАКОНЕЧНИК    | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ | КОЛ-ВО В УПАК. | БИОПОКРЫТИЕ |
|---------|----------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| 103-200 | 19 Fr                | 6.3                  | 28,5       | дисперсионный | 3/8"              | 5              | нет         |
| 103-300 | 23 Fr                | 7.7                  | 28,5       | дисперсионный | 3/8"              | 5              | нет         |

## Бедренные венозные канюли RAP

**Бедренные венозные канюли RAP** за счет двухступенчатой конструкции, обеспечивают улучшенный венозный дренаж по верхней и нижней полым венам и изоляцию сердца от венозной крови.

Эти канюли доступны в двух размерах – 22/22 Fr и 23/25 Fr. Высококачественный мягкий интродюсер имеет плавный переход на корпус канюли, что облегчает введение канюли и уменьшает травму сосуда и мягких тканей.

### Канюля бедренная венозная RAP

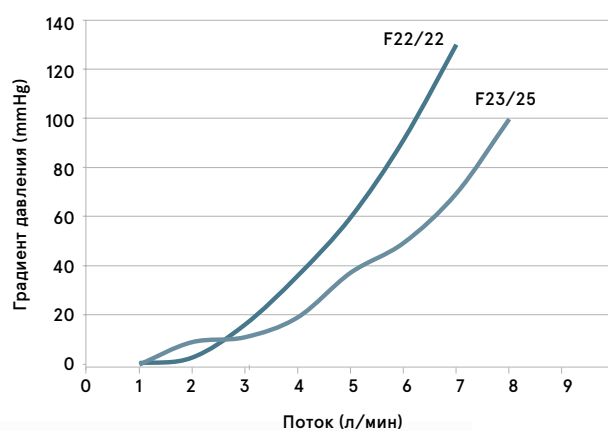


| Артикул | Внешний диаметр (Fr)                     | Внешний диаметр (мм) | Длина (см) | Размер соединения | Кол-во в упаковке | Биопокрытие |
|---------|--|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 200-100 | 22 Fr. дистальный / 22 Fr. проксимальный | 7.3 / 7.3            | 61,5       | 3/8" и 1/2"       | 5                 | нет         |
| 200-150 | 23 Fr. дистальный / 25 Fr. проксимальный | 7.7 / 8.3            | 65,5       | 3/8" и 1/2"       | 5                 | нет         |

## Венозная канюля FlexFlow

**Венозная канюля FlexFlow** – разработанная LivaNova для минимально инвазивной хирургии канюля с интегрированным обтуратором и изгибаемым стилетом.

Канюля FlexFlow, предназначена для непосредственной канюляции правого предсердия. Тонкостенная конструкция канюли и 6-сантиметровая перфорированная зона обеспечивают высокую скорость потока при использовании вакуумного венозного дренажа.

### Канюля венозная FlexFlow

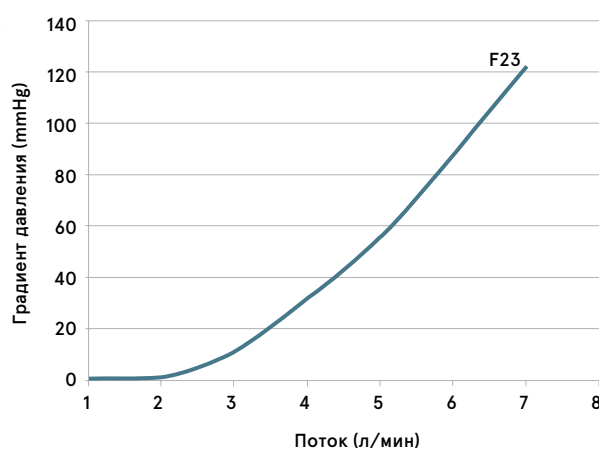


| АРТИКУЛ | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (FR) | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ) | ДЛИНА (СМ) | БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ | КОЛ-ВО В УПАК. | БИОПОКРЫТИЕ |
|---------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 200-200 | 23 Fr                | 7.7                  | 28,5       | да                | 3/8"              | 5              | нет         |

# Артериальные бедренные канюли Easy Flow DUO

Артериальные бедренные канюли Easy Flow DUO имеют дисперсионный наконечник для формирования «мягкого» потока крови в бедренной артерии. Обтуратор позволяет бескровно установить канюлю в артерию. Канюли, укомплектованные пункционным набором, подходят для обеспечения периферического (бедренного) доступа.

## Артериальные бедренные канюли Easy Flow DUO

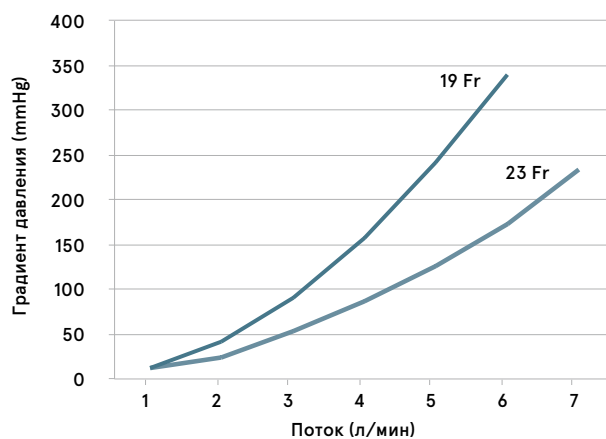

| Артикул | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Длина (см) | Наконечник    | Размер соединения | Набор Сельдингера | Кол-во в упак. | Биопокрытие |
|---------|----------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 103-210 | 19 Fr                | 6.3                  | 28,5       | дисперсионный | 3/8"              | есть              | 5              | нет         |
| 103-310 | 23 Fr                | 7.7                  | 28,5       | дисперсионный | 3/8"              | есть              | 5              | нет         |

В набор входит:  
 – игла 18 га  
 – проводник 0.035" x 100 см  
 – расширители – 12 и 20 Fr